


CATGUT

CHROM

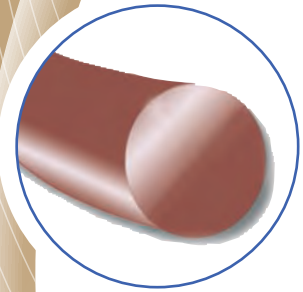

Type	Multifilament torsadé avec un aspect de monofilament
Composition	Tissu conjonctif purifié provenant de la membrane séreuse intestinale de bovins sélectionnés tanné avec des sels de chrome (originaire de pays réputés exempts d'ESB).
Enduit	Aucun
Couleur	Brun foncé
Réaction tissulaire	Modérée
Résorption	Par phagocytose. La résorption est ralentie par le chrome. Résorption totale du fil endéans les 90 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 14 jours. La résorption est plus rapide au niveau des tissus infectés et au niveau des sites présentant des taux d'enzymes protéolytiques élevés (vagin, col de l'utérus, estomac).
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*



www.sutures.be

CATGUT

CHROM

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Résistance à la traction élevée
- ✓ Résorption par phagocytose
- ✓ Structure tordue

- ✓ Diamètre uniforme par polissage "centerless" (apparence de monofilament)
- ✓ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent
- Résorption uniforme
- Propriétés de manipulation excellentes
- Grande flexibilité
- Résistance à la traction élevée
- Excellente sécurité des noeuds

- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Nouage excellent

- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et / ou ligature

spécialement Chirurgie générale
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Obstétrique
Urologie
Chirurgie ophtalmologique

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire.

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire).


Plaies infectées

Sensibilisation ou allergie connue au collagène ou au chrome

RÉSISTANCE À LA TRACTION

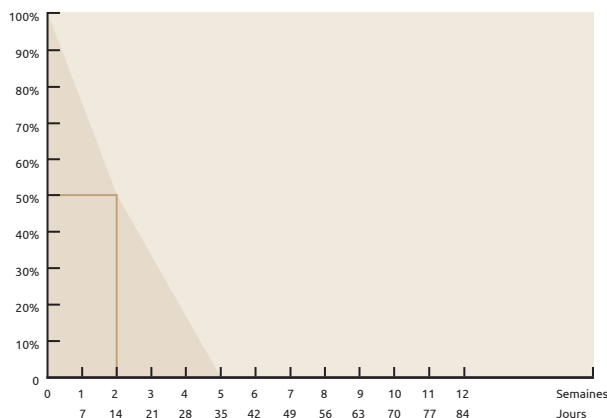

RÉSORPTION

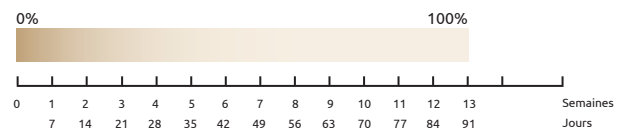

CATGUT

CHROM



Without needle

Metric USP Length Order number

2	4/0	150 cm	<i>brown</i>	2200015
3	3/0	150 cm	<i>brown</i>	2300015
3.5	2/0	150 cm	<i>brown</i>	2350015
4	0	150 cm	<i>brown</i>	2400015
5	1	150 cm	<i>brown</i>	2500015
6	2	150 cm	<i>brown</i>	2600015
7	3	150 cm	<i>brown</i>	2700015
8	4	150 cm	<i>brown</i>	2800015
10	6	150 cm	<i>brown</i>	21000015



Round bodied taper point

Metric USP Length Order number

1/2 circle




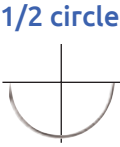




HR 15 mm		1	6/0	75 cm	<i>brown</i>	2100115
		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150115
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200115
HR 20 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150120
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200120
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300120
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350120
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400120
HR 26 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150126
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200126
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300126
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350126
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400126
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500126
HR 30 mm		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200130
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300130
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350130
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400130
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500130
HR 37 mm		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200137
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300137
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350137
		3.5	2/0	90 cm	<i>brown</i>	2350137-90
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400137
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500137


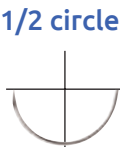

smi




www.sutures.be


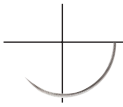









CATGUT




CHROM

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
 1/2 circle	 HR 40 mm	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i> 2350140
		3.5	2/0	90 cm	<i>brown</i> 2350140-90
		4	0	75 cm	<i>brown</i> 2400140
		5	1	75 cm	<i>brown</i> 2500140
		5	1	90 cm	<i>brown</i> 2500140-90
		6	2	75 cm	<i>brown</i> 2600140
	 HR 45 mm	4	0	75 cm	<i>brown</i> 2400145
		6	2	75 cm	<i>brown</i> 2600145
	 HR 48 mm	5	1	75 cm	<i>brown</i> 2500148
	 HR 50 mm	6	2	75 cm	<i>brown</i> 2600150
6		2	90 cm	<i>brown</i> 2600150-90	

 Round bodied taper point reverse cutting double armed	Metric	USP	Length	Order number	
 1/2 circle	 HR 37 mm HS 37 mm	3.5	2/0	150 cm	<i>brown</i> 2350137-1437

 Blunt	Metric	USP	Length	Order number	
 3/8 circle	 DRB 63 mm	5	1	75 cm	<i>brown</i> 2501963

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	DS 12 mm 	1	6/0	45 cm	<i>brown</i>	2101512
		1.5	5/0	45 cm	<i>brown</i>	2151512
	DS 16 mm 	1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2151516
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2201516
	DS 19 mm 	1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2151519
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2201519
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301519
	DS 24 mm 	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351519
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2201524
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301524
	DS 30 mm 	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351524
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401524
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501524
	DS 37 mm 	3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301530
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351530
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401530
	DS 40 mm 	5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501530
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301537
3.5		2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351537	
	DS 37 mm 	4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401537
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501537
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351540
	DS 40 mm 	6	2	75 cm	<i>brown</i>	2601540
		7	3	75 cm	<i>brown</i>	2701540

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	HS 37 mm 	4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401437
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501437