

# SURGICRYL<sup>®</sup>

## PGA

### POLYGLYCOLIC ACID

SURGICRYL<sup>®</sup>  
PGA  
POLYGLYCOLIC ACID



<b>Type</b>	Multifilament tressé et enduit
<b>Composition</b>	Acide polyglycolique
<b>Enduit</b>	Polycaprolactone et calcium stéarate (1%)
<b>Couleur</b>	Violet / Beige - non coloré
<b>Réaction tissulaire</b>	Minimale
<b>Résorption</b>	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 60 à 90 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 21 jours.
<b>Présentation</b>	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité  
&  
sécurité

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SURGICRYL®

PGA  
POLYGLYCOLIC ACID

## CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Structure tressée
  
- Multifilament enduit
  
- Emballage fermé hermétiquement

**INDICATIONS** Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement Chirurgie générale  
Fermeture de peau  
Chirurgie gastro-intestinale  
Gynécologie  
Obstétrique  
Chirurgie plastique  
Urologie  
Chirurgie ophtalmologique  
Chirurgie orthopédique

## AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent

Réaction tissulaire minimale

Taux de résorption prévisible

Propriétés de manipulation excellentes  
Grande flexibilité  
Résistance à la traction élevée  
Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires  
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds  
Action capillaire réduite


Étanchéité et stérilité des produits garanties

**CONTRE-INDICATIONS** Chirurgie cardiovasculaire  
Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire



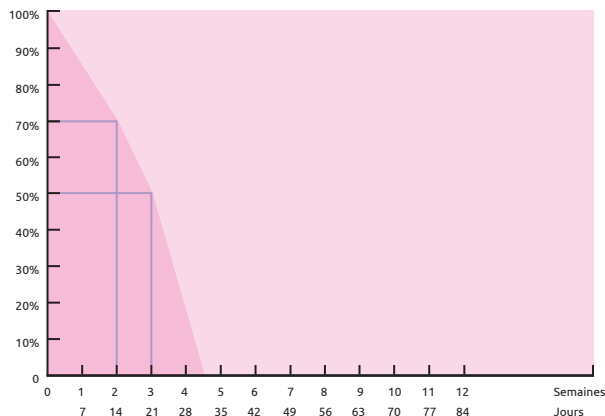


À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

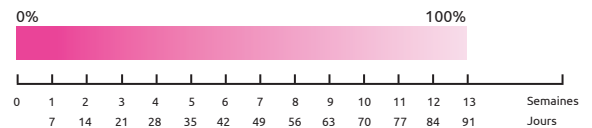


## RÉSISTANCE À LA TRACTION










## RÉSORPTION












aiguille ronde			metric	USP	longueur	référence	
<b>1/2 cercle</b> 	HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11070113
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11100113
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150113
	HR 17 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11070117
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11100117
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150117
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200117
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300117
	HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150122
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200122
			2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i>	11200122U
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300122

aiguille ronde			metric	USP	longueur	référence	
<b>3/8 cercle</b> 	DR 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150217
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200217

aiguille triangulaire			metric	USP	longueur	référence	
<b>1/2 cercle</b> 	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201422
			2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i>	11201422U
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301422
			3	2/0	75 cm	<i>non coloré</i>	11301422U
	HS 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151426
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201426
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201426
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301426

aiguille triangulaire conventionnelle			metric	USP	longueur	référence	
<b>3/8 cercle</b> 	NS 16 mm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101716

aiguille triangulaire		metric	USP	longueur		référence
DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	11071512
		0.7	6/0	45 cm	<i>non coloré</i>	11071512U
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>non coloré</i>	11071512UP
		1	5/0	50 cm	<i>non coloré</i>	11101512UP
		1.5	4/0	50 cm	<i>non coloré</i>	11151512UP
DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11071516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101516
		1	5/0	75 cm	<i>non coloré</i>	11101516U
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>non coloré</i>	11151516U
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201516
DS 16 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>non coloré</i>	11151516UP
DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151519
		1.5	4/0	75 cm	<i>non coloré</i>	11151519U
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201519
		2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i>	11201519U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>non coloré</i>	11151519UP
		2	3/0	50 cm	<i>non coloré</i>	11201519UP
DS 24 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201524
		2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i>	11201524U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301524
		3	2/0	75 cm	<i>non coloré</i>	11301524U
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>non coloré</i>	11201524UP
		3	2/0	50 cm	<i>non coloré</i>	11301524UP

3/8 cercle

