

SURGICRYL[®]

RAPID

POLYGLYCOLIC ACID



Type	Multifilament tressé et enduit
Composition	Acide polyglycolique
Enduit	Polycaprolactone et stéarate de calcium (1%)
Couleur	Beige - non coloré
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 42 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 7 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité
&
sécurité

smi

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

RAPID

POLYGLYCOLIC ACID

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction initiale élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Structure tressée

- Multifilament enduit

- Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous superficiels seuls

spécialement Chirurgie plastique
 Obstétrique (épisiotomie)
 Gynécologie
 Urologie (circoncision)
 Chirurgie ophtalmologique (conjonctives)
 Chirurgie pédiatrique

AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent

Réaction tissulaire minimale

Taux de résorption prévisible, absorption de masse rapide

Propriétés de manipulation excellentes
 Grande flexibilité
 Résistance à la traction élevée
 Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
 Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
 Action capillaire réduite


Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
 Neurochirurgie
 Ligature


Suture résorbable, ne pas utiliser lorsqu'un rapprochement de tissus de plus de 7 jours est requis



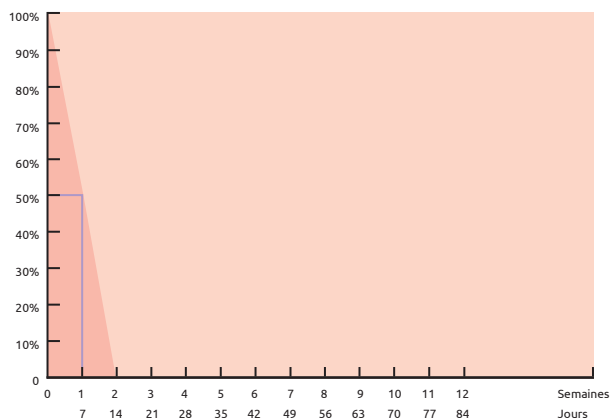


À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

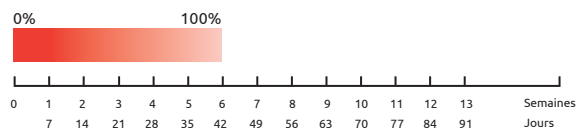


RÉSISTANCE À LA TRACTION


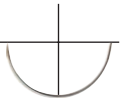







RÉSORPTION


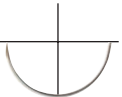














aiguille ronde			metric	USP	longueur	référence
1/2 cercle 	HR 13 mm		1	5/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14100113
			1	5/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14100117
	HR 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14150117
			2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14200117
			1.5	4/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14150122
			2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14200122
HR 22 mm		3	2/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14300122	

aiguille ronde			metric	USP	longueur	référence
5/8 cercle 	FR 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14150317

aiguille ronde pointe tranchante			metric	USP	longueur	référence
1/2 cercle 	HRT 17 mm		2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14200517

aiguille ronde pointe tranchante			metric	USP	longueur	référence
3/8 cercle 	DRT 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14100416
			1.5	4/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14150416
			2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14200416
	DRT 19 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14150419
			2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14200419

aiguille triangulaire			metric	USP	longueur	référence
1/2 cercle 	HS 17 mm		1.5	4/0	45 cm	<i>non coloré</i> 14151417
			2	3/0	45 cm	<i>non coloré</i> 14201417

aiguille triangulaire		metric	USP	longueur	référence	
DS 12 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14071512	
		1	5/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14101512	
		1.5	4/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14151512	
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>non coloré</i> 14071512P	
		1	5/0	50 cm	<i>non coloré</i> 14101512P	
		1.5	4/0	50 cm	<i>non coloré</i> 14151512P	
DS 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14101516	
		1.5	4/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14151516	
		2	3/0	45 cm	<i>non coloré</i> 14201516	
3/8 cercle	DS 16 mm noir		1	5/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14101516VB
	DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14101519
			1.5	4/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14151519
			2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14201519
			3	2/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14301519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>non coloré</i> 14151519P	
		2	3/0	50 cm	<i>non coloré</i> 14201519P	
DS 19 mm noir		1.5	4/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14151519VB	
		2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14201519VB	
DS 24 mm		2	3/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14201524	
		3	2/0	75 cm	<i>non coloré</i> 14301524	
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>non coloré</i> 14201524P	