


SURGICRYL®

910

POLYGLACTINE

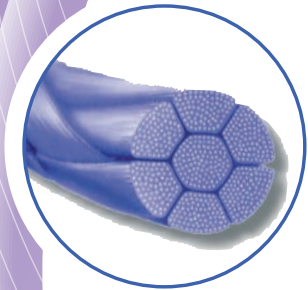

Typ	Geflochtenes und beschichtetes Multifilament
Zusammensetzung	Polyglactin 910, ein Copolymer aus 90% Glycolid und 10%L-lactid
Beschichtung	Poly-glycolid-co-L-lactid und Kalziumstearat (<1%)
Farbe	Violett / Beige - ungefärbt
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 56 bis 70 Tagen. Etwa 50% der Zugfestigkeit verbleiben nach etwa 21 Tagen.
Darbietung	Schachtel mit 12 Fäden



Für Qualität
&
Sicherheit

smi

www.sutures.be

SURGICRYL®

910

POLYGLACTINE

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Reißfestigkeit
- Synthetisch
- Resorption durch Hydrolyse
- Geflochtener Fadenaufbau

- Beschichtetes Multifilament

- Luftdichte Verpackung

VORTEILE

- Ausgezeichneter Gewebehalt
- Minimale Gewebereaktion
- Vorhersehbare Resorptionsgeschwindigkeit
- Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften
- Hohe Flexibilität
- Hohe Reißfestigkeit
- Ausgezeichnete Knotensicherheit

- Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeffekt, Gewebezug und Trauma
- Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit
- Verminderte Kapillarwirkung

- Garantierte Dichtheit und Produktsterilität

**ANWENDUNGS-
GEBIETE**

Adaptation von Weichteilen
und/oder Ligatur

besonders

- Allgemeine Chirurgie
- Hautverschluss
- Viszeralchirurgie
- Plastische Chirurgie
- Ophthalmologie
- Gynäkologie
- Geburtshilfe
- Orthopädie
- Urologie


GEGENANZEIGEN

Herz- und Gefäßchirurgie
Neurochirurgie


Wegen der Resorbierbarkeit sollte es nicht zur Adaptation von Gewebe genutzt werden, das für einen längeren Zeitraum eine Nahtunterstützung erfordert.



Vorsicht bei Patienten mit verzögerter Wundheilung (z.B. geschwächtes Immunsystem).

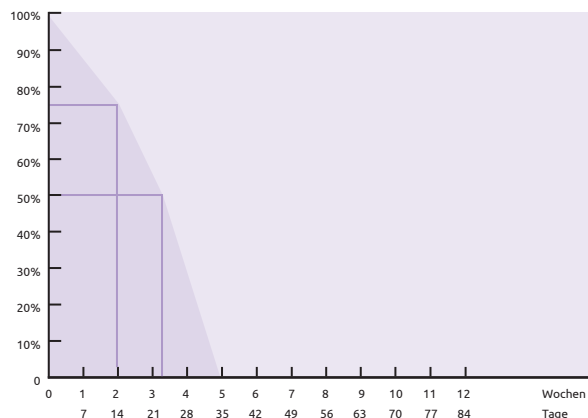

REIßFESTIGKEIT

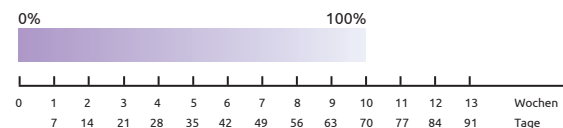














RESORPTION










 Rundkörpernadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer
	HR 13 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violett</i>	15070113
		1	5/0	75 cm	<i>violett</i>	15100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	15150113
	HR 17 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violett</i>	15070117
		1	5/0	75 cm	<i>violett</i>	15100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	15150117
		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	15200117
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	15300117
		HR 22 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>
	2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	15200122	
	3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	15300122	

 Rundkörpernadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer
	DR 17 mm	1.5	4/0	45 cm	<i>violett</i>	15150217
	DR 22 mm	2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	15200222

 Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer
	HS 12 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>violett</i>	15071412
	HS 17 mm	1	5/0	75 cm	<i>violett</i>	15101417
		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	15151417
	HS 22 mm	2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	15201422
	HS 23 mm	5	2	90 cm	<i>violett</i>	15501423
	HS 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	15201426
		3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	15301426

 Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge	Bestellnummer	
	DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violett</i>	15071512
		1	5/0	45 cm	<i>violett</i>	15101512
		1.5	4/0	45 cm	<i>violett</i>	15151512
	DS 16 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violett</i>	15071516
		1	5/0	75 cm	<i>violett</i>	15101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	15151516
		2	3/0	45 cm	<i>violett</i>	15201516-45
	DS 16 mm Easy Pass 	2	3/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	15201516UP
	DS 16 mm schwarz 	0.7	6/0	45 cm	<i>violett</i>	15071516VB
	DS 19 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violett</i>	15101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	15151519
		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	15201519
	DS 19 mm Easy Pass 	1.5	4/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	15151519UP
		2	3/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	15201519UP
	DS 19 mm schwarz 	1	5/0	75 cm	<i>violett</i>	15101519VB
1.5		4/0	75 cm	<i>violett</i>	15151519VB	
DS 24 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	15151524	
	2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	15201524	
	3	2/0	75 cm	<i>violett</i>	15301524	
DS 24 mm Easy Pass 	2	3/0	50 cm	<i>ungefärbt</i>	15201524UP	

 Rundkörpernadel schneidende Spitze		EP	USP	Länge	Bestellnummer	
	HRT 13 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	15150513
	HRT 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	15150517
		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	15200517

 Rundkörpernadel schneidende Spitze		EP	USP	Länge	Bestellnummer	
	DRT 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violett</i>	15150417
		2	3/0	75 cm	<i>violett</i>	15200417