


CATGUT

CHROM

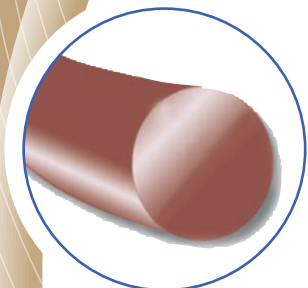

Typ	Gedrehtes Multifilament mit einem monofilen Aspekt
Zusammensetzung	Stränge aus gereinigtem Kollagen, das aus der Serosa von ausgewähltem Rinderdarm gewonnen und mit Chromsalzen gegerbt wird. Herkunft aus als BSE-frei klassifizierten Ländern.
Beschichtung	Keine
Farbe	Dunkelbraun
Gewebereaktion	Mäßig
Resorption	Durch Phagozytose. Die Resorptionsgeschwindigkeit ist durch Gerbung verringert. Vollständige Resorption in ungefähr 90 Tagen. Ca. 50% der Zugfestigkeit verbleiben nach 14 Tagen. Bei Gebrauch in entzündetem Gewebe oder in einem Gewebe mit hoher Konzentration an proteolytischen Enzymen (Magen, Zervix, Vagina) ist die Resorption wesentlich schneller.
Darbietung	Schachtel mit 12 Fäden

*Für Qualität
&
Sicherheit*

smi

www.sutures.be

CATGUT

CHROM

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Hohe Reißfestigkeit
- ✓ Resorption durch Phagozytose
- ✓ Gedrehter Fadenaufbau
- ✓ Gleichmäßiger Durchmesser durch spitzenloses Abschleifen (MonofilamentAspekt)
- ✓ Luftdichte Verpackung


VORTEILE

- Ausgezeichneter Gewebehalt
- Gleichmäßige Resorption
- Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften
- Hohe Flexibilität
- Hohe Reißfestigkeit
- Ausgezeichnete Knotensicherheit
- Geschmeidiger Gewebedurchzug ohne Sägeeﬀekt, Gewebezug und Trauma
- Ausgezeichnete Knotengleiteigenschaften
- Garantierte Dichtheit und Produktsterilität


**ANWENDUNGS-
GEBIETE** Adaptation von Weichteilen
und/oder Ligatur
besonders Allgemeine Chirurgie
Viszeralchirurgie
Gynäkologie
Geburtshilfe
Urologie
Ophthalmologie



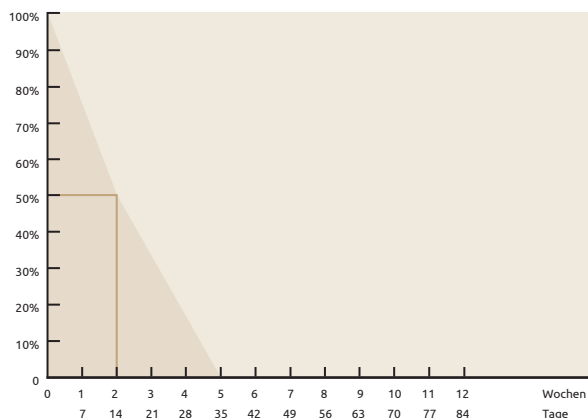

GEGENANZEIGEN Herz- und Gefäßchirurgie
Neurochirurgie
Wegen der Resorbierbarkeit sollte es
nicht zur Adaptation von Gewebe genutzt
werden, das für einen längeren Zeitraum
eine Nahtunterstützung erfordert.
Vorsicht bei Patienten mit verzögerter
Wundheilung (z.B. geschwächtes
Immunsystem).
Im Bereich infizierter Wunden
Bekannte Überempfindlichkeiten oder
Allergien auf Kollagen oder Chrom



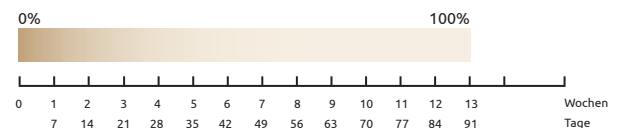



REIßFESTIGKEIT



RESORPTION



 Rundkörpernadel			EP	USP	Länge	Bestellnummer
1/2 Kreis 	HR 15 mm		1	6/0	75 cm	<i>braun</i> 2100115
			1.5	5/0	75 cm	<i>braun</i> 2150115
			2	4/0	75 cm	<i>braun</i> 2200115
	HR 20 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>braun</i> 2150120
			2	4/0	75 cm	<i>braun</i> 2200120
			3	3/0	75 cm	<i>braun</i> 2300120

 Außen schneidende Nadel			EP	USP	Länge	Bestellnummer
3/8 Kreis 	DS 12 mm		1	6/0	45 cm	<i>braun</i> 2101512
			1.5	5/0	45 cm	<i>braun</i> 2151512
	DS 16 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>braun</i> 2151516
			2	4/0	75 cm	<i>braun</i> 2201516
	DS 19 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>braun</i> 2151519
			2	4/0	75 cm	<i>braun</i> 2201519
			3	3/0	75 cm	<i>braun</i> 2301519
			2	4/0	75 cm	<i>braun</i> 2201524
	DS 24 mm		3	3/0	75 cm	<i>braun</i> 2301524