

SMI chirurgische Nadeln werden aus hochwertigen rostfreien Stahlsorten gefertigt, die eine herausragende Qualität durch die Kombination von hoher Duktilität und starkem Biegemoment garantieren. Durch eine neuartige Silikonbeschichtung wird eine geschmeidige Penetration mit reduziertem Gewebetrauma ermöglicht. Die Nadelform wurde für eine maximale Stabilität des Nadelhalters konzipiert.

5/8 Kreis



1/2 Kreis

3/8 Kreis

1/4 Kreis


J-Nadel

Gerade

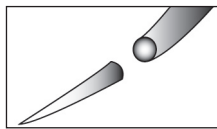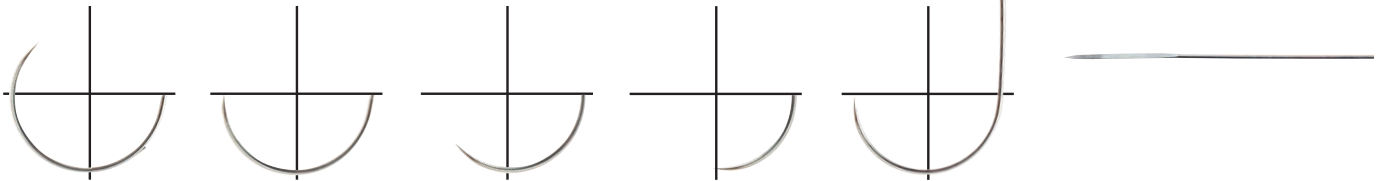


RUNKÖRPERNADEL

Eine rundförmige Nadel, die spitz zuläuft.

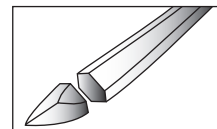


SPATULANADEL

Nadel mit zwei schneidenden Außenkanten.

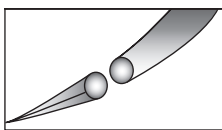


RUNKÖRPERNADEL MIT SCHNEIDENDER SPITZE

Eine rundförmige Nadel mit einer dreieckig geschliffenen schneidenden Spitze.

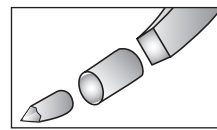


KORONARNADEL

Eine kleine Spitze gefolgt von einem runden Körper und dann einem viereckigen Hauptkörper - für eine bessere Penetration in der Herz- und Gefäßchirurgie.

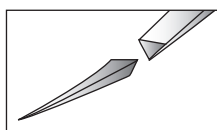


AUSSEN SCHNEIDENDE NADEL

Ein dreieckiger Körper mit einer schneidenden Kante auf der Außenseite.

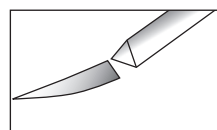


INNEN SCHNEIDENDE NADEL

Ein dreieckiger Körper mit einer schneidenden Kante auf der Innenseite.

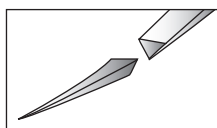

EASY PASS NADEL

Präzisionsspitze mit extra Schliff.

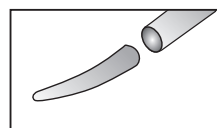

STUMPFE NADEL

Zylindrischer Nadelkörper mit abgerundeter Spitze. Für Weichteile wie Leber und Nieren. Vermindertes Risiko von Nadelstichverletzungen.