


SURGICRYL[®]

PGA

POLYGLYCOLIC ACID

SURGICRYL[®]
PGA
POLYGLYCOLIC ACID

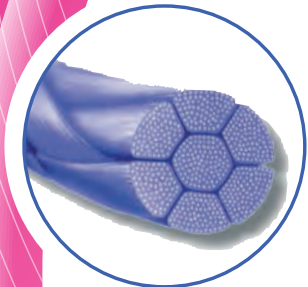

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type | Multifilament tressé et enduit |
| Composition | Acide polyglycolique |
| Enduit | Polycaprolactone et calcium stéarate (1%) |
| Couleur | Violet / Beige - non coloré |
| Réaction tissulaire | Minimale |
| Résorption | L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 60 à 90 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persiste après 21 jours. |
| Présentation | Boîte de 12 pochettes |



Pour qualité
&
sécurité

smi

www.sutures.be

SURGICRYL®

PGA
POLYGLYCOLIC ACID

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Structure tressée

- Multifilament enduit

- Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement Chirurgie générale
Fermeture de peau
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Obstétrique
Chirurgie plastique
Urologie
Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie orthopédique

AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent

Réaction tissulaire minimale

Taux de résorption prévisible

Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite


Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

RÉSISTANCE À LA TRACTION

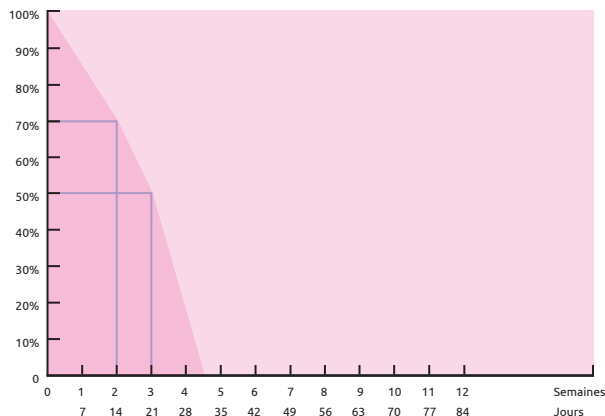

RÉSORPTION

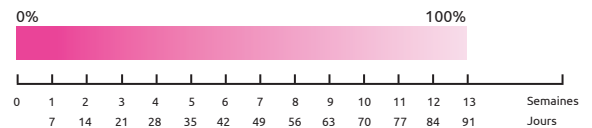

sans aiguille



| metric | USP | longueur | | référence |
|--------|-----|------------|---------------|------------|
| 2 | 3/0 | 150 cm | <i>violet</i> | 11200015 |
| 3 | 2/0 | 150 cm | <i>violet</i> | 11300015 |
| 3.5 | 0 | 150 cm | <i>violet</i> | 11350015 |
| 4 | 1 | 150 cm | <i>violet</i> | 11400015 |
| 5 | 2 | 150 cm | <i>violet</i> | 11500015 |
| 6 | 3&4 | 150 cm | <i>violet</i> | 11600015 |
| 7 | 5 | 150 cm | <i>violet</i> | 11700015 |
| 8 | 6 | 150 cm | <i>violet</i> | 11800015 |
| 1.5 | 4/0 | 3 x 50 cm | <i>violet</i> | 11150050 |
| 2 | 3/0 | 3 x 50 cm | <i>violet</i> | 11200050 |
| 3 | 2/0 | 3 x 50 cm | <i>violet</i> | 11300050 |
| 3.5 | 0 | 3 x 50 cm | <i>violet</i> | 11350050 |
| 4 | 1 | 3 x 50 cm | <i>violet</i> | 11400050 |
| 5 | 2 | 3 x 50 cm | <i>violet</i> | 11500050 |
| 2 | 3/0 | 12 x 45 cm | <i>violet</i> | 11200045 |
| 3 | 2/0 | 12 x 45 cm | <i>violet</i> | 11300045 |
| 3.5 | 0 | 12 x 45 cm | <i>violet</i> | 11350045 |
| 4 | 1 | 12 x 45 cm | <i>violet</i> | 11400045 |
| 5 | 2 | 12 x 45 cm | <i>violet</i> | 11500045 |
| 1.5 | 4/0 | 6 x 45 cm | <i>violet</i> | 11150045-6 |
| 2 | 3/0 | 6 x 45 cm | <i>violet</i> | 11200045-6 |
| 3 | 2/0 | 6 x 45 cm | <i>violet</i> | 11300045-6 |
| 3.5 | 0 | 6 x 45 cm | <i>violet</i> | 11350045-6 |
| 4 | 1 | 6 x 45 cm | <i>violet</i> | 11400045-6 |
| 5 | 2 | 6 x 45 cm | <i>violet</i> | 11500045-6 |
| 2 | 3/0 | 10 x 60 cm | <i>violet</i> | 11200060 |
| 3 | 2/0 | 10 x 60 cm | <i>violet</i> | 11300060 |
| 3.5 | 0 | 10 x 60 cm | <i>violet</i> | 11350060 |
| 2 | 3/0 | 5 x 70 cm | <i>violet</i> | 11200070 |
| 3 | 2/0 | 5 x 70 cm | <i>violet</i> | 11300070 |
| 3.5 | 0 | 5 x 70 cm | <i>violet</i> | 11350070 |
| 4 | 1 | 5 x 70 cm | <i>violet</i> | 11400070 |
| 5 | 2 | 5 x 70 cm | <i>violet</i> | 11500070 |

sans aiguille



Ligapack



| metric | USP | longueur | référence |
|--------|-----|----------|------------------------|
| 1.5 | 4/0 | 250 cm | <i>violet</i> 11150025 |
| 2 | 3/0 | 250 cm | <i>violet</i> 11200025 |
| 3 | 2/0 | 250 cm | <i>violet</i> 11300025 |
| 3.5 | 0 | 250 cm | <i>violet</i> 11350025 |
| 4 | 1 | 250 cm | <i>violet</i> 11400025 |
| 5 | 2 | 250 cm | <i>violet</i> 11500025 |
| 6 | 3&4 | 250 cm | <i>violet</i> 11600025 |





aiguille ronde









1/2 cercle









| | metric | USP | longueur | référence |
|----------|--------|-----|----------|-----------------------------|
| HR 13 mm | 0.7 | 6/0 | 75 cm | <i>violet</i> 11070113 |
| | 1 | 5/0 | 75 cm | <i>violet</i> 11100113 |
| | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>violet</i> 11150113 |
| HR 17 mm | 0.7 | 6/0 | 75 cm | <i>violet</i> 11070117 |
| | 1 | 5/0 | 75 cm | <i>violet</i> 11100117 |
| | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>violet</i> 11150117 |
| | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> 11200117 |
| | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> 11300117 |
| HR 22 mm | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>violet</i> 11150122 |
| | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> 11200122 |
| | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>non coloré</i> 11200122U |
| HR 26 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> 11300122 |
| | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>violet</i> 11150126 |
| | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> 11200126 |
| HR 30 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> 11300126 |
| | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>non coloré</i> 11300126U |
| | 3.5 | 0 | 75 cm | <i>violet</i> 11350126 |
| | 4 | 1 | 75 cm | <i>violet</i> 11400126 |
| | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> 11200130 |
| | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> 11300130 |
| HR 36 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>non coloré</i> 11300130U |
| | 3.5 | 0 | 75 cm | <i>violet</i> 11350130 |
| | 4 | 1 | 75 cm | <i>violet</i> 11400130 |
| | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> 11200136 |
| | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> 11300136 |
| HR 36 mm | 3.5 | 0 | 90 cm | <i>violet</i> 11350136 |
| | 4 | 1 | 90 cm | <i>violet</i> 11400136 |



| aiguille ronde | |  | metric | USP | longueur | référence |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|----------|---------------------------|
| 1/2 cercle  | HR 40 mm |  | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> 11300140 |
| | | | 3.5 | 0 | 90 cm | <i>violet</i> 11350140 |
| | | | 4 | 1 | 75 cm | <i>violet</i> 11400140-75 |
| | | | 4 | 1 | 90 cm | <i>violet</i> 11400140 |
| | | | 5 | 2 | 75 cm | <i>violet</i> 11500140-75 |
| | HR 48 mm |  | 5 | 2 | 90 cm | <i>violet</i> 11500140 |
| | | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> 11300148 |
| | | | 3.5 | 0 | 90 cm | <i>violet</i> 11350148 |
| | | | 4 | 1 | 90 cm | <i>violet</i> 11400148 |
| | | | 5 | 2 | 90 cm | <i>violet</i> 11500148 |
| 6 | 3&4 | 90 cm | <i>violet</i> 11600148 | | | |







| aiguille ronde | |  | metric | USP | longueur | référence |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|------------------------|
| 3/8 cercle  | DR 17 mm |  | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>violet</i> 11150217 |
| | | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> 11200217 |



| aiguille ronde | |  | metric | USP | longueur | référence |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|------------------------|
| 5/8 cercle  | FR 27 mm |  | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> 11300327 |

| aiguille ronde | |  | metric | USP | longueur | référence |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|------------------------|
| aiguille J  | JR 36 mm |  | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> 11303036 |
| | | | 3.5 | 0 | 75 cm | <i>violet</i> 11353036 |
| | | | 4 | 1 | 75 cm | <i>violet</i> 11403040 |

| aiguille ronde | |  | metric | USP | longueur | référence | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|---------------|---------------|
| 5/8 cercle |  JR 36 mm FR 27 mm |  | 3.5 | 0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11353036-0327 |
| aiguille J | | | | | | | |

| aiguille ronde loop | |  | metric | USP | longueur | référence | |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|---------------|----------|
| 1/2 cercle | HR 50 mm |  | 4 | 1 | 150 cm | <i>violet</i> | 11400950 |

| aiguille ronde pointe tranchante | |  | metric | USP | longueur | référence | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 1/2 cercle | HRT 26 mm |  | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11300526 |
| | HRT 30 mm |  | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11300530 |
| | | | 3.5 | 0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11350530 |
| | | | 4 | 1 | 75 cm | <i>violet</i> | 11400530 |
| | HRT 36 mm |  | 3 | 2/0 | 90 cm | <i>violet</i> | 11300536 |
| | | | 3.5 | 0 | 90 cm | <i>violet</i> | 11350536 |
| | | | 4 | 1 | 90 cm | <i>violet</i> | 11400536 |
| | HRT 40 mm |  | 3.5 | 0 | 90 cm | <i>violet</i> | 11350540 |
| | | | 4 | 1 | 90 cm | <i>violet</i> | 11400540 |
| | | | | 5 | 2 | 90 cm | <i>violet</i> |
| HRT 48 mm |  | 4 | 1 | 90 cm | <i>violet</i> | 11400548 | |

| aiguille ronde pointe tranchante | |  | metric | USP | longueur | référence | |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|---------------|----------|
| aiguille J | JRT 31 mm |  | 4 | 1 | 75 cm | <i>violet</i> | 11403131 |

aiguille triangulaire



metric

USP




longueur


référence








3/8 cercle

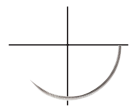


| aiguille triangulaire | | metric | USP | longueur | | référence |
|-----------------------|--|--------|-----|----------|-------------------|------------|
| DS 12 mm | | 0.7 | 6/0 | 45 cm | <i>violet</i> | 11071512 |
| | | 0.7 | 6/0 | 45 cm | <i>non coloré</i> | 11071512U |
| | | 1 | 5/0 | 45 cm | <i>violet</i> | 11101512 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11151512 |
| DS 12 mm Easy Pass | | 0.7 | 6/0 | 50 cm | <i>non coloré</i> | 11071512UP |
| | | 1 | 5/0 | 50 cm | <i>non coloré</i> | 11101512UP |
| | | 1.5 | 4/0 | 50 cm | <i>non coloré</i> | 11151512UP |
| DS 16 mm | | 0.7 | 6/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11071516 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11101516 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | <i>non coloré</i> | 11101516U |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11151516 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>non coloré</i> | 11151516U |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11201516 |
| DS 16 mm Easy Pass | | 1.5 | 4/0 | 50 cm | <i>non coloré</i> | 11151516UP |
| DS 19 mm | | 1 | 5/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11101519 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11151519 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>non coloré</i> | 11151519U |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11201519 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>non coloré</i> | 11201519U |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11301519 |
| DS 19 mm Easy Pass | | 1.5 | 4/0 | 50 cm | <i>non coloré</i> | 11151519UP |
| | | 2 | 3/0 | 50 cm | <i>non coloré</i> | 11201519UP |
| DS 24 mm | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11201524 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>non coloré</i> | 11201524U |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11301524 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>non coloré</i> | 11301524U |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11351524 |
| DS 24 mm Easy Pass | | 2 | 3/0 | 50 cm | <i>non coloré</i> | 11201524UP |
| | | 3 | 2/0 | 50 cm | <i>non coloré</i> | 11301524UP |
| DS 30 mm | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11151530 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11201530 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11301530 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>non coloré</i> | 11301530U |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11351530 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | <i>violet</i> | 11401530 |
| | | 5 | 2 | 75 cm | <i>violet</i> | 11501530 |



| aiguille triangulaire | |  | metric | USP | longueur | référence | |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|---------------|----------|
| 3/8 cercle | DS 36 mm |  | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11301536 |
| | | | 3.5 | 0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11351536 |
| | | | 4 | 1 | 75 cm | <i>violet</i> | 11401536 |
| | DS 40 mm |  | 5 | 2 | 75 cm | <i>violet</i> | 11501536 |
| | | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11301540 |
| | | | 3.5 | 0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11351540 |
| | | | 4 | 1 | 75 cm | <i>violet</i> | 11401540 |
| | | | 5 | 2 | 75 cm | <i>violet</i> | 11501540 |





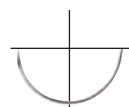



| aiguille triangulaire | |  | metric | USP | longueur | référence | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|-------------------|-----------|
| 1/2 cercle | HS 22 mm |  | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11201422 |
| | | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>non coloré</i> | 11201422U |
| | | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11301422 |
| | | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>non coloré</i> | 11301422U |
| | HS 26 mm |  | 1.5 | 4/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11151426 |
| | | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11201426 |
| | | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11301426 |
| | | | 3.5 | 0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11351426 |
| | HS 30 mm |  | 5 | 2 | 90 cm | <i>violet</i> | 11501430 |
| | | | 3 | 2/0 | 90 cm | <i>violet</i> | 11301436 |
| | | | 3.5 | 0 | 90 cm | <i>violet</i> | 11351436 |
| | | | 4 | 1 | 90 cm | <i>violet</i> | 11401436 |
| | HS 36 mm |  | 5 | 2 | 90 cm | <i>violet</i> | 11501436 |
| | | | 3 | 2/0 | 90 cm | <i>violet</i> | 11301440 |
| | | | 3.5 | 0 | 90 cm | <i>violet</i> | 11351440 |
| | | | 4 | 1 | 90 cm | <i>violet</i> | 11401440 |
| HS 40 mm |  | 5 | 2 | 90 cm | <i>violet</i> | 11501440 | |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | <i>violet</i> | 11351448 | |
| | | 4 | 1 | 90 cm | <i>violet</i> | 11401448 | |
| HS 48 mm |  | 5 | 2 | 90 cm | <i>violet</i> | 11501448 | |
| | | 4 | 1 | 90 cm | <i>violet</i> | 11401448 | |
| | | 6 | 3&4 | 90 cm | <i>violet</i> | 11601448 | |







1/2 cercle

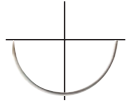









| aiguille triangulaire conventionnelle  | | metric | USP | longueur | référence | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|-------------------|-----------|
| droite | GS 60 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11202160 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | <i>non coloré</i> | 11202160U |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | <i>violet</i> | 11302160 |

| aiguille triangulaire conventionnelle  | | metric | USP | longueur | référence | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|---------------|----------|
| 3/8 cercle  | NS 16 mm  | 1 | 5/0 | 45 cm | <i>violet</i> | 11101716 |

| aiguille spatulée 2 aiguilles  | | metric | USP | longueur | référence | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|---------------|-------|
| 1/2 cercle  | 2 x HSP 8 mm 200 µm  | 0.5 | 7/0 | 45 cm | <i>violet</i> | OSU07 |

| aiguille spatulée 2 aiguilles  | | metric | USP | longueur | référence | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|---------------|----------|
| 3/8 cercle  | 2 x DSP 6 mm 200 µm  | 0.4 | 8/0 | 30 cm | <i>violet</i> | OSU08-30 |
| | | 0.4 | 8/0 | 45 cm | <i>violet</i> | OSU08 |
| | 2 x DSP 6,2 mm 150 µm  | 0.2 | 10/0 | 30 cm | <i>violet</i> | OSU10 |
| | 2 x DSP 6,4 mm 200 µm  | 0.3 | 9/0 | 30 cm | <i>violet</i> | OSU09 |
| | 0.5 | 7/0 | 45 cm | <i>violet</i> | OSU072 | |
| | 2 x DSP 8 mm 200 µm  | 0.5 | 7/0 | 45 cm | <i>violet</i> | OSU071 |

| aiguille spatulée  | | metric | USP | longueur | référence | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|---------------|---------|
| 3/8 cercle  | DSP 6,2 mm 150 µm  | 0.2 | 10/0 | 10 cm | <i>violet</i> | OSU101 |
| | DSP 6,4 mm 200 µm  | 0.3 | 9/0 | 30 cm | <i>violet</i> | OSU09-1 |

| aiguille spatulée 2 aiguilles  | | metric | USP | longueur | référence | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|---------------|-------|
| 1/4 cercle  | 2 x VSP 8 mm 300 µm  | 0.7 | 6/0 | 45 cm | <i>violet</i> | OSU06 |
| | 350 µm  | 1 | 5/0 | 45 cm | <i>violet</i> | OSU05 |

EN DÉVIDOIRS

A utiliser dans les 4 mois après la première ouverture

| metric | USP | longueur | référence |
|--------|-----|----------|-----------|
| 1.5 | 4/0 | 15 m | 11151 |
| 2 | 3/0 | 15 m | 11201 |
| 2 | 3/0 | 25 m | 11202 |
| 3 | 2/0 | 15 m | 11301 |
| 3 | 2/0 | 25 m | 11302 |
| 3 | 2/0 | 50 m | 11305 |
| 3.5 | 0 | 15 m | 11351 |
| 3.5 | 0 | 25 m | 11352 |
| 3.5 | 0 | 50 m | 11355 |
| 4 | 1 | 15 m | 11401 |
| 4 | 1 | 25 m | 11402 |
| 4 | 1 | 50 m | 11405 |
| 5 | 2 | 15 m | 11501 |
| 5 | 2 | 25 m | 11502 |
| 5 | 2 | 50 m | 11505 |
| 5 | 2 | 100 m | 115010 |
| 6 | 3&4 | 15 m | 11601 |
| 6 | 3&4 | 25 m | 11602 |
| 6 | 3&4 | 50 m | 11605 |
| 6 | 3&4 | 100 m | 116010 |
| 7 | 5 | 15 m | 11701 |
| 7 | 5 | 25 m | 11702 |
| 7 | 5 | 50 m | 11705 |
| 8 | 6 | 15 m | 11801 |
| 8 | 6 | 25 m | 11802 |
| 8 | 6 | 50 m | 11805 |



with storage solution

| metric | USP | longueur | référence |
|--------|-----|----------|-----------|
| 1.5 | 4/0 | 15 m | 15151 |
| 2 | 3/0 | 15 m | 15201 |
| 2 | 3/0 | 25 m | 15202 |
| 3 | 2/0 | 15 m | 15301 |
| 3 | 2/0 | 25 m | 15302 |
| 3 | 2/0 | 50 m | 15305 |
| 3.5 | 0 | 15 m | 15351 |
| 3.5 | 0 | 25 m | 15352 |
| 3.5 | 0 | 50 m | 15355 |
| 4 | 1 | 15 m | 15401 |
| 4 | 1 | 25 m | 15402 |
| 4 | 1 | 50 m | 15405 |
| 5 | 2 | 15 m | 15501 |

| metric | USP | longueur | référence |
|--------|-----|----------|-----------|
| 5 | 2 | 25 m | 15502 |
| 5 | 2 | 50 m | 15505 |
| 5 | 2 | 100 m | 155010 |
| 6 | 3&4 | 15 m | 15601 |
| 6 | 3&4 | 25 m | 15602 |
| 6 | 3&4 | 50 m | 15605 |
| 6 | 3&4 | 100 m | 156010 |
| 7 | 5 | 15 m | 15701 |
| 7 | 5 | 25 m | 15702 |
| 7 | 5 | 50 m | 15705 |
| 8 | 6 | 15 m | 15801 |
| 8 | 6 | 25 m | 15802 |
| 8 | 6 | 50 m | 15805 |

A utiliser dans les 6 mois après la première ouverture